

Articolatore SAM 2P



Il famoso articolatore SAM® 2P con le sue caratteristiche ceste condilari gialle, è stato continuamente migliorato in questi ultimi 30 anni. La ben congegnata costruzione che riproduce l'articolazione umana (concetto Arcon) e le logiche possibilità di movimento, fanno del SAM® 2P uno strumento di immediato apprendimento.

Per questo motivo è l'articolatore ideale non solo per imparare, ma anche per il quotidiano lavoro nello studio dentistico e nel laboratorio odontotecnico. La sua linea essenziale, l'elevata stabilità e il peso limitato hanno reso questo articolatore famoso nel mondo.

Una delle principali caratteristiche del SAM® 2P è il semplice fissaggio della centrica tramite due particolari viti a molla. È possibile, inoltre, impostare arbitrariamente le angolazioni di Bennett e dei tragitti condilari, mentre le ceste e gli inserti di Bennett sono facilmente sostituibili.

Naturalmente sono disponibili svariati accessori che rendono l'articolatore completamente impostabile e adatto anche alla protesi totale.

Caratteristiche del SAM® 2P



Bloccaggio della centrica con vite a molla



Impostazione dell'angolo di Bennett




Impostazione del tragitto condilare



Asta incisale con scala millimetrata



Perno di supporto per arco di trasferimento

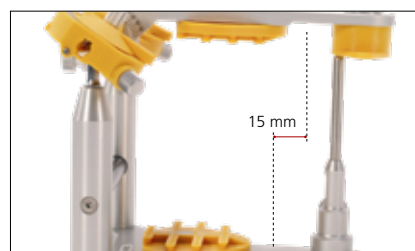

Posizione delle basette di montaggio: bassetta inferiore 15 mm sagittale



Basette di montaggio disponibili: MPS magnetiche o da avvitare (opzionale AXIOSPLIT®)



Accessori: ceste condilari a curvatura 2 e 3



Accessori: guide di Bennett curve



Accessori: inserti di protrusione 1 - 6 mm



Accessori: piatto incisale regolabile



L'elevata qualità visibile e l'esatta lavorazione garantiscono lunga durata e precisione

Codice	Descrizione	
ART 300	SAM® 2P articolatore SAM® 2P con ceste condilari a curvatura 1 (ART 225), guide di Bennett bianche (ART 150) e verdi (ART 176), piatto incisale piano (ART 275) (vedi immagine a lato)	
ART 315M	SAM® 2P, MPS come ART 300, ma con basette di montaggio magnetiche	
ART 301K	Kit articolatore SAM® 2P Contenuto: 1 articolatore SAM® 2P (ART 300) 1 kit arco di trasferimento AXIOQUICK® III - NT (ATB 350K) 1 supporto di trasferimento AX (ATB 398) 20 basette di montaggio avvitabili (ART 120) 1 valigia da trasporto gialla (ART 599)	
ART 319MK	Kit articolatore SAM® 2P, MPS come ART 304K, ma con basette di montaggio magnetiche MPS (vedi immagine a lato)	
ART 170	Assortimento guide di Bennett per SAM® 2P, comprende un paio per tipo di guide verdi (ART 176), blu (ART 177) e rosse (ART 178)	
ART 180	Assortimento inserti di protrusione per SAM® 2P, comprende due pezzi per tipo di inserti bianchi (ART 181), gialli (ART 182), verdi (ART 183), rossi (ART 184), blu (ART 185) e neri (ART 186)	
ART 225	Ceste condilari a curvatura 1 un paio per SAM® 2P, con bombatura leggera integrata, bloccaggio di centrica e guide di Bennett bianche (ART 150)	
ART 230	Ceste condilari a curvatura 2 un paio per SAM® 2P, con bombatura media integrata, bloccaggio di centrica e guide di Bennett bianche (ART 150)	
ART 235	Ceste condilari a curvatura 3 un paio per SAM® 2P, con bombatura accentuata integrata, bloccaggio di centrica e guide di Bennett bianche (ART 150)	

