

# Articolatore SAM 3



Il SAM® 3 è l'articolatore ideale per chi pretende prestazioni elevate. Si distingue infatti per l'alta precisione e la grande funzionalità. La sua estetica e la qualità dei materiali impiegati per la sua costruzione, fanno del SAM® 3 uno strumento unico nel suo genere. Come tutti gli articolatori SAM®, anche questo modello è stato concepito sulla base del concetto Arcon e della sistematica SAM®. Grazie al perfetto bloccaggio della centrica (triplo fissaggio conico di posizione delle sfere condilari), il SAM® 3 offre la massima precisione in illimitate rotazioni di apertura.

Le guide di Bennett con curvatura possono rimanere nell'articolatore senza pregiudicare la precisione della centrica. Le curvature dei tragitti condilari sono facilmente sostituibili. Le calotte trasparenti posteriori che coprono le ceste sono utili per eseguire movimenti di lateralità e protrusione senza che le sfere condilari escano dalle ceste. Opzionale è la regolazione millimetrica della protrusione e della retrusione. Naturalmente anche questo articolatore può sfruttare la modularità dei componenti SAM®.

### Caratteristiche del SAM® 3



Bloccaggio della centrica con anello conico



Impostazione dell'angolo di Bennett




Impostazione del piano di guida



Calotta per ceste condilari



Perno di supporto per arco di trasferimento

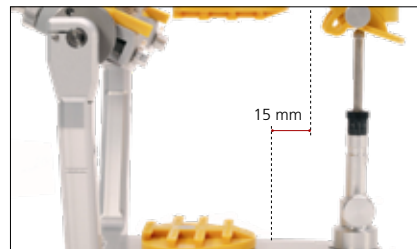

Posizione delle basette di montaggio:  
basetta inferiore 15 mm sagittale



Protrusione (6 mm), retrusione (2 mm)



Antenna superiore con articolatore aperto



Antenne posteriori



Accessori: asta incisale microregolabile



Accessori: piatto incisale regolabile



L'elevata qualità visibile e l'esatta lavorazione garantiscono lunga durata e precisione

Codice	Descrizione	
ART 500	<b>SAM® 3 Basic</b> articolatore SAM® 3 con inserti piani-guida a curvatura 1 bianchi (ART 541), guide di Bennett in metallo (ART 539) e verde chiaro (ART 540), piatto incisale piano (ART 275), antenna superiore (ART 525) e posteriori (ART 526)	
ART 515M	<b>SAM® 3 Basic, MPS</b> come ART 500, ma con basette di montaggio magnetiche (vedi immagine a lato)	
ART 502K	<b>Kit articolatore SAM® 3 Basic</b> Contenuto: 1 articolatore SAM® 3 Basic (ART 500) 1 kit arco di trasferimento AXIOQUICK® AX (ATB 390K) 1 supporto di trasferimento AX (ATB 398) 1 supporto in acrilico XL (ATB 334) 20 basette di montaggio gialle avvitabili (ART 120) 1 valigia da trasporto gialla (ART 599)	
ART 517MK	<b>Kit articolatore SAM® 3 Basic, MPS</b> come ART 502K, ma con basette di montaggio magnetiche MPS (vedi immagine a lato)	
ART 531	<b>SAM® 3 Standard</b> articolatore SAM® 3 con viti di protrusione/retrusione (ART 530), inserti piani-guida a curvatura 1 bianchi (ART 541), guide di Bennett in metallo (ART 539) e verde chiaro (ART 540), piatto incisale piano (ART 275), antenna superiore (ART 525) e posteriori (ART 526)	
ART 546M	<b>SAM® 3 Standard, MPS</b> come ART 531, ma con basette di montaggio magnetiche (vedi immagine a lato)	
ART 548	<b>Set inserti di Bennett e piani-guida 3</b> per SAM® 3. Contenuto: 1 assortimenti di inserti piani-guida (ART 540) 1 assortimento di guide di Bennett II (ART 547) 1 paio di anelli guida sec. Gutowski (ART 581) 1 chiave	
ART 530	<b>Viti di protrusione/retrusione</b> due pezzi per SAM® 3 Basic, per una precisa protrusione da 0 a 6 mm e retrusione da 0 a 2 mm, con chiave e chiave a brugola.	

Codice	Descrizione
--------	-------------

ART 570	<p><b>Kit ampliamento Professional per SAM® 3</b></p> <p>Contenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 paio di guide di Bennett blu (ART 177)</li> <li>1 paio di rosse (ART 178)</li> <li>1 paio di piani-guida a curvatura 2 verdi (ART 542)</li> <li>1 paio di piani-guida a curvatura 3 rossi (ART 543)</li> <li>1 paio di anelli guida protrusiva sec. Gutowski (ART 581)</li> <li>1 chiave gialla (ART 510)</li> <li>1 asta incisale micro regolabile IIPM (ART 533)</li> <li>1 piatto incisale regolabile (ART 260)</li> <li>1 supporto telescopico (ATB 336)</li> <li>1 base magnetica per supporto telescopico (ATB 338 / 339)</li> <li>1 aiuto di montaggio (MOH 560) per SAM® 3.</li> </ul>
---------	---



ART 571	<p><b>Kit ampliamento Professional per SAM® 3, MPS</b></p> <p>come ART 570, ma per basette di montaggio magnetiche</p>
---------	--

ART 550	<p><b>SAM® 3 Professional</b></p> <p>articolatore SAM® 3 con antenna superiore (ART 525), antenne posteriori (ART 526), assortimento curvature varie (ART 540), assortimento guide di Bennett II (ART 547), asta incisale IIPM micro regolabile (ART 533), piatto incisale, regolabile (ART 260), viti di protrusione/retrusione (ART 530)</p>
---------	--



ART 565M	<p><b>SAM® 3 Professional, MPS</b></p> <p>come ART 550, ma con basette di montaggio magnetiche MPS (vedi immagine a lato)</p>
----------	---

ART 552K	<p><b>Kit articolatore SAM® 3 Professional</b></p> <p>Contenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 articolatore SAM® 3 Professional (ART 550)</li> <li>1 kit arco di trasferimento AXIOQUICK® AX (ATB 390K)</li> <li>1 supporto telescopico per forchetta (ATB 336)</li> <li>1 base magnetica per supporto telescopico (ATB 338 / 339)</li> <li>1 supporto di trasferimento AX (ATB 398)</li> <li>1 aiuto di montaggio (MOH 560) con 30 astine elastiche</li> <li>20 basette di montaggio gialle avvitabili (ART 120)</li> <li>2 anelli guida protrusiva sec. Gutowski (ART 581)</li> <li>1 valigia da trasporto gialla (ART 599)</li> </ul>
----------	---



ART 567MK	<p><b>Kit articolatore SAM® 3 Professional, MPS</b></p> <p>come ART 552K, ma con basette di montaggio magnetiche MPS (vedi immagine a lato)</p>
-----------	---

