

# Articolatore SAM SE



“Special Edition”


Realizzato con materiali di ultima generazione, questo articolatore estremamente leggero è conforme alle dimensioni del cranio e compatibile con tutti i componenti del sistema SAM®.

Il SAM® SE è il risultato della sostituzione dell'alluminio con una nuova generazione di materiale che rende l'articolatore di gran lunga più economico, estremamente più leggero, ma al tempo stesso molto resistente e indicato per tutte le discipline dell'odontoiatria moderna.

Grazie alla nostra pluriennale esperienza in campo diagnostico e terapeutico, è stato possibile realizzare un articolatore a valori medi all'avanguardia, con montaggio dei modelli secondo l'originale posizionamento nel cranio delle arcate e inclinazione regolabile dei tragitti condilari a curvatura 1. La guida di Bennett corrisponde all'inserto verde del sistema SAM® nonché all'Analog-Block #1 nel sistema Panadent.

Le dimensioni secondo lo standard SAM®, consentono l'impiego di tutti i normali accessori in programma.

### Caratteristiche del SAM® SE

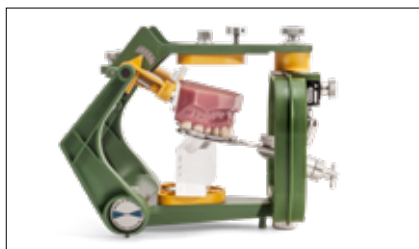

Montaggio del modello superiore



Centrica aperta




Centrica chiusa







Curvatura della cesta condilare

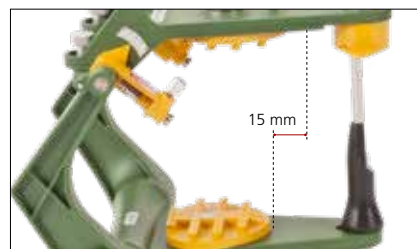

Sfere condilari orizzontali



Posizione delle basette di montaggio:  
basetta inferiore 15 mm sagittale

Codice	Descrizione	
ART 600	<p><b>SAM® SE</b>            Articolatore SAM® SE „Special Edition“ (in plastica altamente prestazionale utilizzata in ambito aeronautico) con integrata curvatura 1 e guida di Bennett con movimento di lateralità normale e piatto incisale piano (ART 275)</p>	
ART 615M	<p><b>SAM® SE, MPS</b>            come ART 600, ma con basette di montaggio magnetiche MPS (vedi immagine a lato)</p>	
ART 616MK	<p><b>Kit articolatore SAM® SE, MPS</b>            Contenuto:            1 articolatore SAM® SE, MPS (ART 615M)            1 kit arco di trasferimento AXIOQUICK® III - NT (ATB 350K)            1 supporto di trasferimento SE (ATB 397)            1 supporto in acrilico XL (ATB 334)            10 basette di montaggio magnetiche MPS            1 valigia da trasporto trasparente (ART 598)</p>	
ART 617MK	<p><b>Kit articolatore SAM® SE, MPS</b>            come ART 616MK, ma con kit arco di trasferimento AXIOQUICK® AX (ATB 390K)</p>	
ATB 397	<p><b>Supporto di trasferimento SE</b>            per facilitare e rendere sicuro il montaggio dei modelli nell'articolatore SAM® SE</p>	
ART 611	<p><b>Estrattore MPS per SE</b></p>	
ART 620	<p><b>Asta incisale SE, completa</b></p>	